



DELBio

DELBio

A Delta Group Company

www.delbio.com.tw

超音波 メッシュ型ネブライザー

- ★ 小型で高性能、外出時の急な発作にも対応
- ★ 圧倒的な静音性
- ★ 薬液をムダにしない特許保有低残液量ボトル
- ★ 安心素材使用 BPA有害物質不含有
- ★ マイクロ粒子により呼吸もなめらか
- ★ 20分タイマー付き
- ★ 電池式なので電源を気にせず使用
(ACアダプターもあり)



コンパクト
で
ポータブル

静音性

高噴霧
(マクロ粒子)

こんな時に使えます！




風邪により息苦しい
鼻水が止まらない...




起動の炎症 / 感染の治療
旅行先でも

ミスト粒子のイメージ図

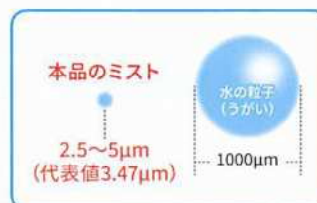

鼻から吸うのも
効果的！

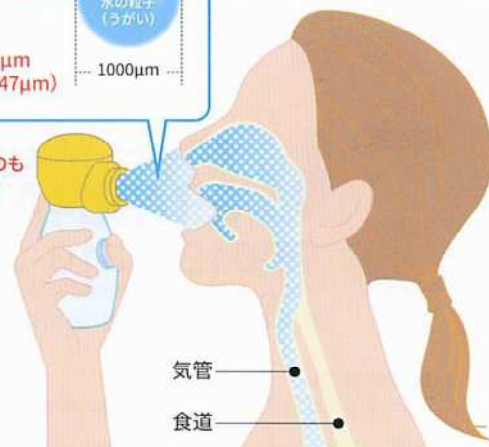

DELBio メッシュ型ネブライザー

BPA(ビスフェノールA)フリー薬液ボトル




煮沸しても有害物質が溶け出さない、BPAフリーの薬液ボトルを採用。残留液が少なく、洗浄が容易な独自の薬剤チャンバー設計。

吸い込み面形状(メッシュ材質)



日本製ニッケルパラジウムメッシュ吸入機構を採用。均等な細かい粒子の噴霧を実現し、薬液の高い吸収率。

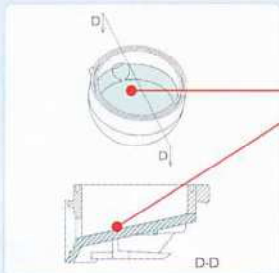

・低残液量を実現した独自の薬液ボトルデザイン


液体残留シミュレーションを重ね最も薬液が流れやすく、残り難い最適な角度と形状をデザイン

※デザイン特許保有パテントNo.
EU:EP 2848274 ; TW:I539978
; US:20150077552-patent pending

※デザイン特許資料(抜粋)

*薬液ボトルは高圧蒸気滅菌器使用可

マウスピース、マスク同梱

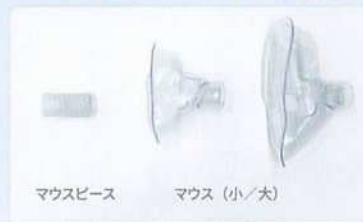


お子さまは小さいマスク、大人の方は大きいマスクを使用するなど、用途に合わせて使い分けが可能です。標準で付属しています。改めて購入する必要はありません。

仕様

- 届出番号 13B2X10288000002
- 製品名 DELBio メッシュ型ネブライザー
- 型番 DK010-272
- サイズ 約64.6(L) x 49.6(W) x 115.1(H) mm
- 質量 105±5g(乾電池含まず)
- ボトル容量 約8ml
- 電源 電源アダプターまたは単3乾電池2本(Class II / 内部電源)
- 噴霧能力 0.25ml/min 以上
- 噴霧粒子径 2.3~5μm(代表値:3.47μm)
- 保管・輸送環境 温度:-20~50℃ 湿度:80%未満(結露無きこと) 気圧:700~1013hPa
- JANコード 4589639590190



内容物

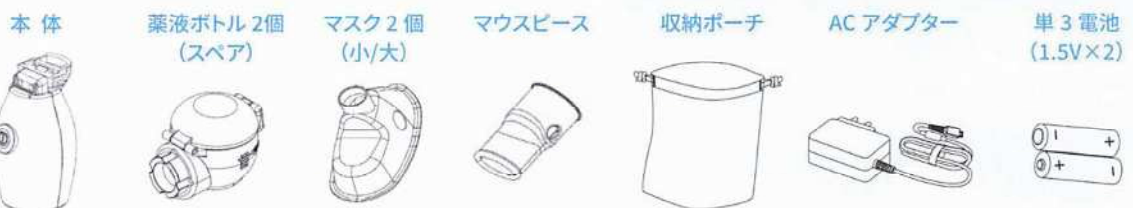

〈製造販売業者〉
デルタ電子株式会社



〈製造業者〉
DELBio(Wujiang)Co.,Ltd(中国)



アローメディカル 株式会社



〒221-0865 横浜市神奈川区片倉4-7-28
TEL 045(481)7471 FAX 045(481)7554

<https://arrowmedical.co.jp>